

ZAFENA 



Zafena Work Station

Rett svar til rett pasient

Zafena Work Station - rett svar til rett pasient

Gode og sikre rutiner i alle ledd må til for at pasienter skal få riktige prøvesvar i en hektisk hverdag på legekontor. I 2017 gjorde Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) en spørre undersøkelse til deres deltakere i primærhelsetjenesten der kun 13 % av 1086 deltakerne i undersøkelsen svarer at de har automatisk svaroverføring fra alle egne instrumenter. Noklus oppsummerer i undersøkelsen at det må stilles krav til sikker overføring av prøve svar ved innkjøp av nye instrumenter og systemer. Mer fokus på resultatoverføring og svarutgivelse er en viktig del av gode rutiner og muligheter som finnes bør benyttes.


ZAFENA har erfaring med oppkobling av ulike instrumenter over mange år fra Sverige. Det startet i 2010 da Zafena utviklet og leverte standardisert oppkobling til LIS for eget INR system Simple Simon PT-INR. I 2014 kom flere etterspørsler om mulighet til å støtte ulike andre måle instrumenter med samme oppkoblingen. Nå er listen lang over ulike instrumenter ZafenaWork Station støtter for oppkobling og flere nye kommer stadig til etter ønske.

De allerede eksisterende instrumenter på ditt laboratorie får mulighet til oppkobling så du slipper å gå til innkjøp av nye instrumenter når man stiller krav til sikker overføring av pasient svar slik Noklus anbefaler.

Gode rutiner, sikre svarhåndteringer bidrar til riktige svar til riktig pasient som dermed får riktig behandling

Zafena Work Station -arbeidsstasjon for oppkobling

- Blod analyser
- Urin analyser
- ESR (senkning)
- Hurtigtester
- EKG
- Spirometri
- Vekter
- Lengemålere
- Blod trykk
- Temperatur måler

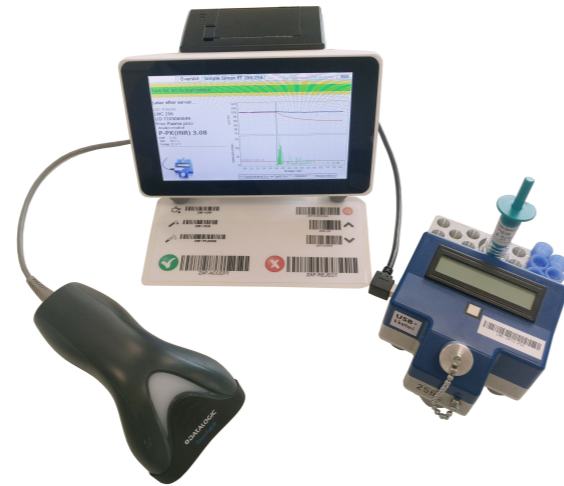

Zafena Work Station - Hvordan fungerer det?

Det er enkle trinn for bruk av Zafena Work Station i din hverdag. Det er samme "1-2-3" metode for alle instrumenter. Man, velger instrument som skal benyttes ved å skanne instrument-tag på instrumentet . Disse instrument tagger kommer med og settes på instrumenter for å identifisere modulene som er valgt. Identiteten følger med analyseresultatet.

Slik fungerer det:

- 1 Start systemet
- 2 Skann instrument (bare ved oppstart og ved bytte av instrument)
- 3 Skann ID nr. (pasient barkode eller taste inn via et tastatur)
- 4 Analyser som vanlig
5. Aksepter og resultatet blir overført til journalsystemet
6. Ved å skanne annet apparat når som helst kan flere analysering pågå samtidig

Enkelt og sikkert system som kan gjøre arbeidsdagen for medarbeidere bedre og tryggere

Framtidssikkert og kostnadsbesparende

Zafena Work Station - Hvordan komme igang?

En Zafena Work Station gir deg mulighet til oppkobling av 3 ulike valgfrie instrumenter med ledning og opptil flere med Bluetooth. Etter dine valg og plassering av instrumenter på ditt laboratorie ordner Zafena med kommunikasjonen og innstillinger etter standardiserte protokoller som dermed gir Zafena Work Station mulighet til å fungere mot alle journalsystemer.

Når du mottar systemet settes det opp enkelt selv og installasjon skjer ved å skanne barkoder som følger med.

Ta direkte kontakt til Zafena for en gjennomgang av dine muligheter for plassering av skjerm(er) og for tilbud på skjerm (er) og lisens kostnad.

